

1




Verwijder de beschermdop.

2



Schud de dosisaerosol goed.

3

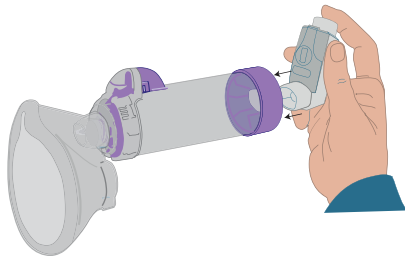

Plaats de dosisaerosol in de InspiraChamber®.

4


Fout



Goed


Ga rechtop zitten of staan, het hoofd iets achterover.

5

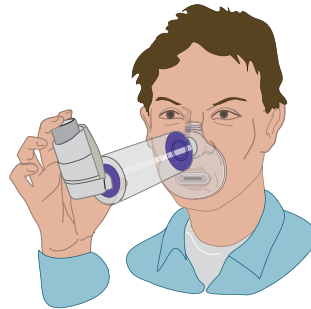

Adem bij voorkeur volledig uit naast de InspiraChamber®. Plaats het masker op het gezicht en zorg dat dit goed aansluit.


6

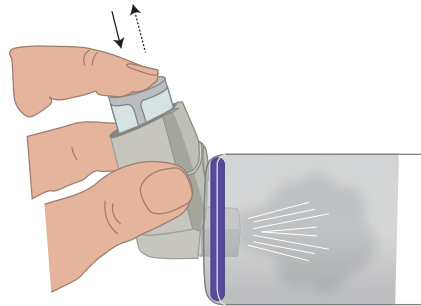

Druk de dosisaerosol één keer in.

7

5 x

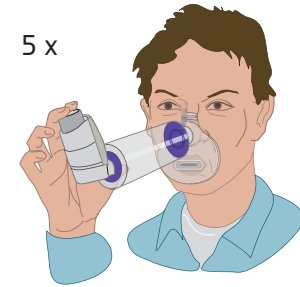

Vijf keer rustig in- en uitademen door de InspiraChamber®.

8



Herhaal bij meerdere doses de stappen 2 t/m 7.

9



Plaats de beschermdop terug op de dosisaerosol.

10



Spoel zo nodig de mond/keel en eet of drink iets.

Goed om te weten



- Als de dosisaerosol langer dan een week niet is gebruikt, beschermdop verwijderen, goed schudden en pas daarna één pufje in de lucht spuiten (bij een nieuwe dosis-aerosol drie pufjes).



- Let op de vervaldatum (EXP). Vervang de Inspirator Chamber® eenmaal per jaar. Vooral het ventiel kan na verloop van tijd minder goed functioneren.



- Bewaar de dosisaerosol op kamertemperatuur.

Reinigen



- De Inspirator Chamber® eenmaal per week schoonmaken.
 - Haal de Inspirator Chamber® uit elkaar.
 - Was de onderdelen in een schoon sopje.



- De Inspirator Chamber® niet afspoelen en niet afdrogen. Goed uitschudden en aan de lucht laten drogen.



- De Inspirator Chamber® niet in de vaatwasser reinigen.

Naam inhalator: **InspiraChamber®** met masker

Naam medicijn: _____

Categorie: _____

Tijdstip inname: _____

Dosis: _____

Voor info contact opnemen met: _____

Telefoon: _____