


1



Verwijder de beschermdop.

2

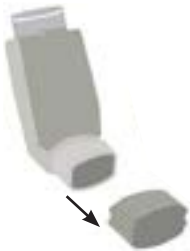

Verwijder de beschermdop.

3



Schud de dosisaerosol krachtig.

4



Plaats de dosisaerosol in de OptiChamber®.

5

Fout



Goed

Ga rechtop zitten of staan, het hoofd iets achterover.

6



Adem volledig uit naast de OptiChamber®.

7



Houd de OptiChamber® horizontaal. Plaats het mondstuk tussen de tanden en sluit de lippen eromheen.

8



Druk de dosisaerosol één keer in.

1 tot 5 x

9



Standaardmethode: vijf keer rustig in- en uitademen door de OptiChamber®.

1-teug-methode: Inhaleer zo diep mogelijk met een gelijkmatige inademing en houd vervolgens de adem 10 tellen vast.

Uw zorgverlener bepaalt de voor u geschikte methode.

10



Herhaal bij meerdere doses de stappen 3 t/m 9.

11



Plaats de beschermdop terug op de dosisaerosol. Niet op de OptiChamber®.

12



Spoel zo nodig de mond/keel en eet of drink iets.

Goed om te weten



- Als de dosisaerosol langer dan een week niet is gebruikt, beschermdop verwijderen, krachtig schudden en pas daarna één pufje in de lucht spuiten (bij een nieuwe dosisaerosol drie pufjes).



- Let op de vervaldatum (EXP). Vervang de OptiChamber® eenmaal per jaar.



- Tijdens het inhaleren mag u geen fluittoon horen. Inhaleer minder krachtig wanneer u een fluittoon hoort.



- Bewaar de dosisaerosol op kamertemperatuur.

Reinigen



- De OptiChamber® eenmaal per week schoonmaken.
 - Haal de OptiChamber® uit elkaar.
 - Verwijder het achterstuk en draai het voorstuk tegen de klok in los.
 - Was de onderdelen in een lauw en schoon afwassopje.



- De OptiChamber® afspoelen, goed uitschudden en niet afdrogen. Laat de OptiChamber® aan de lucht drogen. Zorg ervoor dat de onderdelen goed droog zijn alvorens u de OptiChamber® weer in elkaar zet.



- De OptiChamber® niet in de vaatwasser reinigen.

Naam inhalator: **OptiChamber®** met mondstuk

Naam medicijn: _____

Inhalatiemethode: standaardmethode 1-teugmethode

Categorie: _____

Tijdstip inname: _____

Dosis: _____

Voor info contact opnemen met: _____

Telefoon: _____