

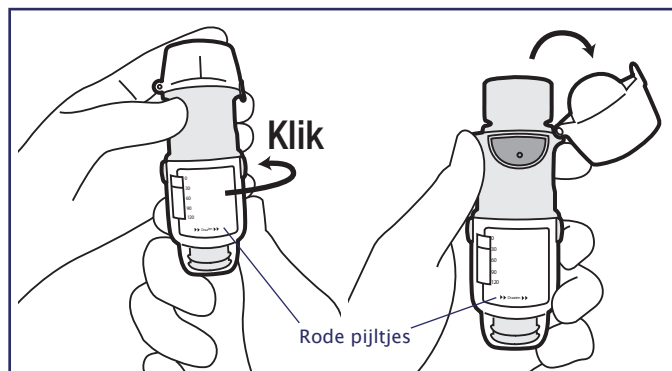


Gebruiksaanwijzing Respimat®


*Voorbereiding bij nieuwe Respimat® voer stap A t/m H uit, zie volgende pagina.
Langer dan 1 week niet gebruikt: voer stap E t/m G uit, zie volgende pagina. En ga verder met stap 2.
Langer dan 3 weken niet gebruikt: voer stap E t/m H uit, zie volgende pagina.

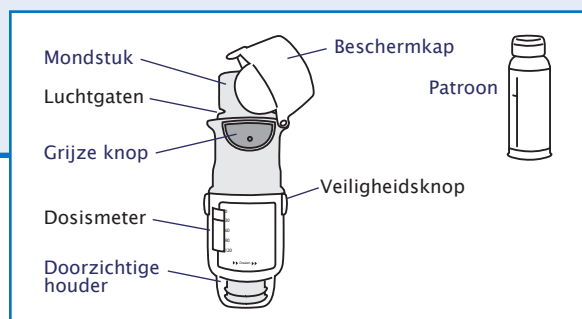


- Stap 1. Zorg dat uw mond leeg is.
- Stap 2. Houd de Respimat® rechtop met de beschermkap gesloten. Draai de houder een halve draai in de richting van de rode pijltjes (onderaan het etiket), totdat deze klikt.
- Stap 3. Klap de beschermkap helemaal open.

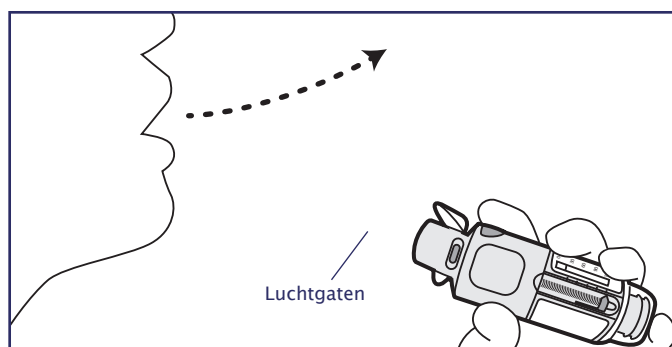

- Stap 4. Ga rechtop zitten of staan, houd uw hoofd iets achterover. Adem uit. Doe dit langzaam en volledig. Adem niet uit in de Respimat®.

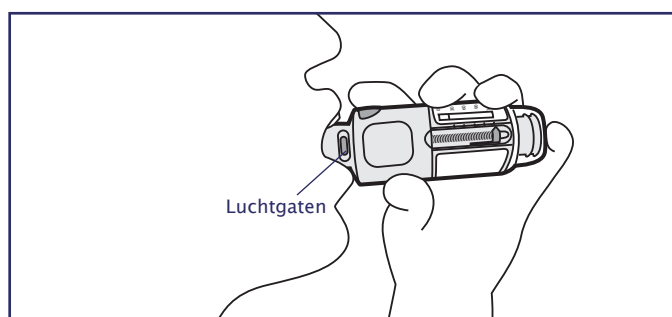

- Stap 5. Breng de Respimat® naar uw mond, met het mondstuk naar u toe. Neem het mondstuk tussen uw tanden en sluit uw lippen eromheen. Zorg dat de luchtgaten vrij blijven.

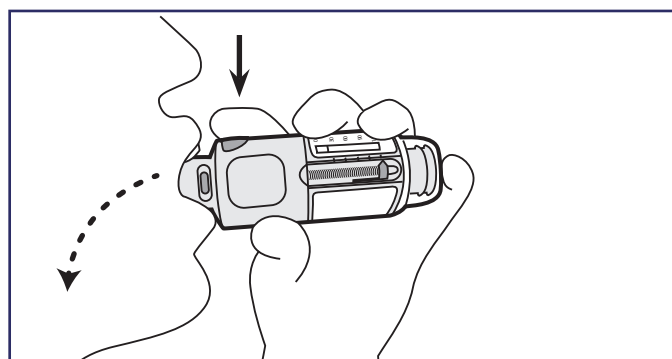


- Stap 6. Adem nu met een gelijkmatige en diepe teug in. Druk aan het begin van de inademing 1 keer op de grijze knop en blijf zo lang als u kunt langzaam inademen.
- Stap 7. Houd uw adem 10 seconden vast of zo lang als u kunt. Neem de Respimat® uit uw mond. Adem rustig uit. Adem niet uit in de Respimat®. Doe de beschermkap dicht.


- Stap 8. Herhaal stap 2 t/m 7 voor een tweede puffje (bij de Respimat® dient u elke keer 2 puffjes vlak na elkaar te nemen).
- Stap 9. Spoel uw mond en keel met water: het eerste slokje gorgelen en uitspugen, het tweede slokje doorslikken.

Gebruiksaanwijzing Respimat®

*Voorbereiding: de eerste keer een nieuwe Respimat® gebruiken

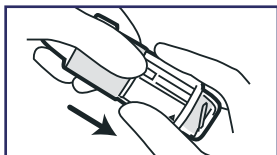


Stap A. Houd de beschermkap dicht, druk op de veiligheidsknop en trek de doorzichtige houder los.

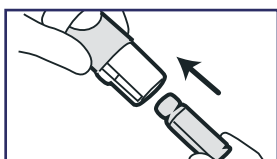


Stap B. Neem de patroon uit de verpakking. Duw het smalle uiteinde van de patroon in de inhalator (puffer) totdat u weerstand voelt.




Stap C. Plaats de Respimat® rechtopstaand op een vlakke stevige ondergrond en druk stevig met één hand boven op de Respimat®, zodat de patroon met 1 klik in de Respimat® wordt gedrukt. De patroon steekt een klein stukje uit de inhalator. Verwijder de patroon niet meer.

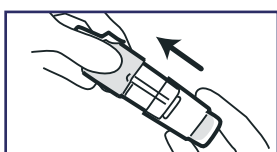

Stap D. Schuif de doorzichtige houder op zijn plaats en verwijder deze niet meer.

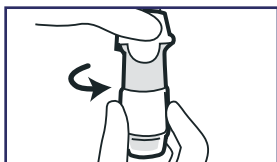


Stap E. Houd de Respimat® rechtop met de beschermkap gesloten. Draai de houder een halve draai in de richting van de rode pijltjes onderaan het etiket, totdat deze klikt.

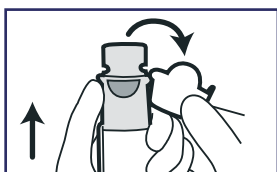

Stap F. Open de beschermkap totdat deze helemaal opengeklapt is.

Stap G. Richt de Respimat® naar de grond. Druk op de grijze knop en sluit de beschermkap.

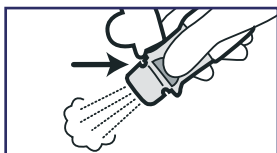

Stap H. Herhaal stap E t/m G totdat er een wolk te zien is. Herhaal deze nog 3 keer (hiermee spuit u het drijfgas weg en komt er voldoende medicijn vrij). Ga verder met stap 1 van de gebruiksaanwijzing op de eerste pagina.

Over uw medicijn (in te vullen door uw zorgverlener)

Naam van het medicijn:

Hoe vaak per dag / tijdstip inhaleren:

Volgorde van inhaleren (bij meerdere medicijnen):

Tips en informatie

1. Maak het mondstuk schoon met een vochtige tissue. Nooit afspoelen met water.
2. Gooi de Respimat® na 3 maanden gebruik weg ook al is deze nog niet leeg. Na 3 maanden werkt het medicijn niet meer goed.

Bekijk voor meer informatie het filmpje van de Respimat® op www.inhalatorgebruik.nl.