

1




Verwijder de beschermdop.

2



Schud de dosisaerosol krachtig.

3

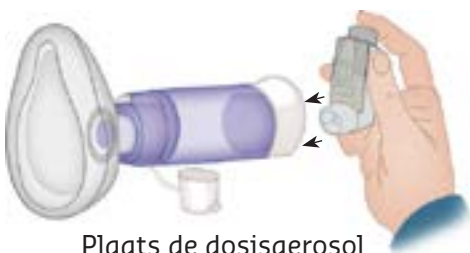

Plaats de dosisaerosol in de OptiChamber®.

4



Ga rechtop zitten of staan, het hoofd iets achterover.

5



Adem indien mogelijk volledig uit naast de OptiChamber®.

6



Houd de OptiChamber® horizontaal. Plaats dan het masker op het gezicht en zorg dat dit goed aansluit.

7



Druk de dosisaerosol één keer in.

8



Adem 5 keer rustig in en uit door de OptiChamber®.

9



Herhaal bij meerdere doses de stappen 2 t/m 8. Spuit niet meer dan één dosis tegelijk in de OptiChamber®.

10



Plaats de beschermdop terug op de dosisaerosol. Niet op de OptiChamber®.

11



Spoel zo nodig de mond/keel en eet of drink iets.

Goed om te weten



- Als de dosisaerosol langer dan een week niet is gebruikt, beschermdop verwijderen, krachtig schudden en pas daarna één pufje in de lucht spuiten (bij een nieuwe dosisaerosol drie pufjes).



- Let op de vervaldatum (EXP). Vervang de OptiChamber® eenmaal per jaar.



- Tijdens het inhaleren mag u geen fluittoon horen. Inhaleer minder krachtig wanneer u een fluittoon hoort.



- Bewaar de dosisaerosol op kamertemperatuur.

Reinigen



- De OptiChamber® eenmaal per week schoonmaken.
 - Haal de OptiChamber® uit elkaar.
 - Verwijder het masker en het achterstuk en draai het voorstuk tegen de klok in los.
 - Was de onderdelen in een lauw en schoon afwassopje.



- De OptiChamber® afspoelen, goed uitschudden en niet afdrogen. Laat de OptiChamber® aan de lucht drogen. Zorg ervoor dat de onderdelen goed droog zijn alvorens u de OptiChamber® weer in elkaar zet.



- De OptiChamber® niet in de vaatwasser reinigen.

Naam inhalator: **OptiChamber®** met masker

Naam medicijn: _____

Categorie: _____

Tijdstip inname: _____

Dosis: _____

Voor info contact opnemen met: _____

Telefoon: _____