


1



Open de beschermkap.
Open daarna het mondstuk volledig.

2

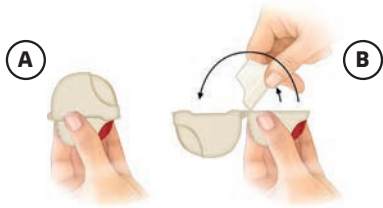


Doe de capsule in de opening.
Sluit het mondstuk totdat u klik hoort.

3



Druk de rode knop volledig in en laat daarna weer los.

4



Ga rechtop zitten of staan,
het hoofd iets achterover.

5



Adem langzaam en volledig uit
(niet in de Tavulus®).

6



Plaats het mondstuk tussen de tanden
en sluit de lippen eromheen.

7



Inhaleer zo diep mogelijk met een
krachtige inademing. U inhaleert krachtig
genoeg wanneer u de capsule hoort trillen.

8



Neem de Tavulus® uit de mond.
Houd de adem tien tellen vast of zo lang
als comfortabel is.

9



Adem rustig uit.

10



Herhaal de stappen 4 t/m 9 om er zeker
van te zijn dat alle poeder is geïnhaléerd.

11



Verwijder de capsule. Sluit het mondstuk
en plaats de beschermkap terug.

12



Spoel zo nodig de mond/keel
en eet of drink iets.

Goed om te weten



- Bij het inademen door de Tavulus® hoort u de capsule trillen.



- Druk de capsule **niet** door de folie maar trek de beschermende folie eraf.



- Let op de vervaldatum (EXP).



- Bewaar de Tavulus® op kamertemperatuur (niet in de badkamer of keuken).

Reinigen



- Maak de Tavulus® eenmaal per week schoon. Open de beschermkap en het mondstuk (zie stap 1 op andere pagina). Duw de knop naar boven om de capsulehouder te openen.



- Was de Tavulus® met lauw en stromend water. Schud het water uit de Tavulus®.



- Zet de Tavulus® open en laat deze 24 uur aan de lucht drogen.

Naam inhalator: **Tavulus®**

Naam medicijn: _____

Categorie: _____

Tijdstip inname: _____

Dosis: _____

Voor info contact opnemen met: _____

Telefoon: _____